

primax tilbehør

**signia**

Life sounds brilliant.

# Hør lydens farver.

Tilbehør til høreapparater.



[www.signia-hearing.dk](http://www.signia-hearing.dk)

Høresystemer

**SIEMENS**



## Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag.

Følg børnene til skole om morgenen, mød venner til frokost, og se fjernsyn om aftenen. Hver dag er fuld af forskellige lyttesituationer og samtaler. Ville det ikke være fantastisk, hvis du kunne streame lyden direkte til dine høreapparater og diskret justere dem med din smartphone?

Se vores brede udvalg af tilbehør til dine høreapparater på de følgende sider :

### **Audiostreaming**

easyTek/easyTek App	p. 6
Voicelink	p. 13
TV Transmitter	p. 13

### **Fjernbetjener**

miniPocket	p. 14
easyPocket	p. 15
touchControl App	p. 16

### **Oplader**

eCharger	p. 18
Car adapter	p. 18

## Praktisk tilbehør.

Holder dig forbundet og i kontrol.

OverSIGT



Dine høreapparater hjælper dig gennem dagen - tilbehøret hjælper dig med at gøre det hele mere fleksibelt.

Hvad enten du ønsker at ændre indstillingerne på dine høreapparater, streame lyd direkte til dine ører eller benytte muligheden for genopladning, så tilbyder vi et bredt sortiment af praktisk og stilfuldt tilbehør, der gør din hverdag lettere.

Det rette tilbehør kan gøre funktionerne i dit høreapparat endnu lettere at indstille. Forestil dig, at du diskret kunne skifte lytteprogram eller ændre lydstyrken bare ved at trykke på din smartphone. Eller at du kunne give en mikrofon til en taler, så du kan høre hvert et ord højt og tydeligt. Eller bare, at du kunne anbringe dine høreapparater med genopladelige batterier i opladeren natten over, så de er klar til en ny dag.

### easyTek og easyTek App



touchControl App

### TV Transmitter



VoiceLink

### easyPocket



miniPocket



eCharger



### easyTek og easyTek App.

Få lytteoplevelser, der passer til dig og din hverdag.

Forestil dig, hvor klar en telefonsamtale, et fjernsynsprogram eller musik vil lyde, når den streames direkte til dine ører. easyTek™ gør dette - og mere.

Du bærer easyTek om halsen, hvor den holder dig forbundet ved at streame lyd direkte til dine høreapparater. easyTek fungerer også som en fjernbetjening.

Når den kombineres med den gratis easyTek App™ til Android- og iOS-smartphones, kan du også bruge din telefon som fjernbetjening til at vælge lytteprogram og ændre lydstyrke diskret.



easyTek og easyTek App

## easyTek.


Teknologi, der er let at bruge.

At forvandle dine to høreapparater til en kvalitetshovedtelefon i stereo er nemt. Den runde funktionsknap gør det let med ét tryk at tænde og slukke for easyTek, besvare et telefonopkald eller vælge audiekilder som for eksempel mp3-afspillere eller fjernsyn.

Det er let og hurtigt at ændre på lydstyrken på dine høreapparater.

Lysdioderne giver dig vigtige oplysninger, når det for eksempel er tid til at oplade batteriet.

Audiostreaming.

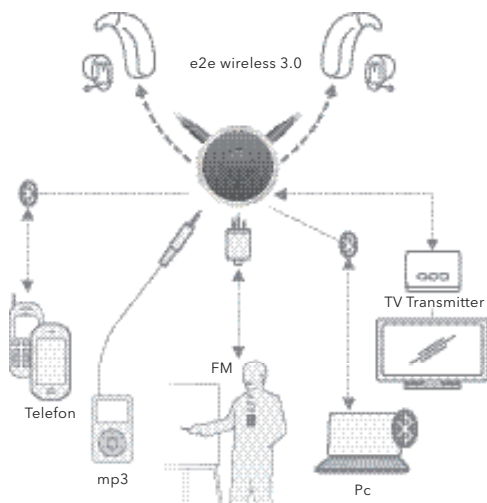

easyTek gør det muligt at forbinde høreapparaterne til iPhones, iPads, Android-enheder og enhver mobiltelefoner med Bluetooth.

## Audiostreaming

easyTek i detaljer.




- 1 Funktionsknap
- 2 Hals slynge med antenne
- 3 Mikrofonåbninger
- 4 Statusoplysninger med lysdioder.
- 5 Stik til halsslynge
- 6 Lydstyrkeknapper
- 7 Stik til audioenheder (3.5 mm stik)
- 8 Stik til FM modtager
- 9 Reset knap
- 10 Micro-USB stik til opladning

## Sådan parrer du easyTek.

Så let som at tælle til tre.

Før du begynder at bruge din easyTek, skal du parre den med dine høreapparater. Følg anvisningen til højre, så kommer du hurtigt i gang med dine høreapparater og easyTek.

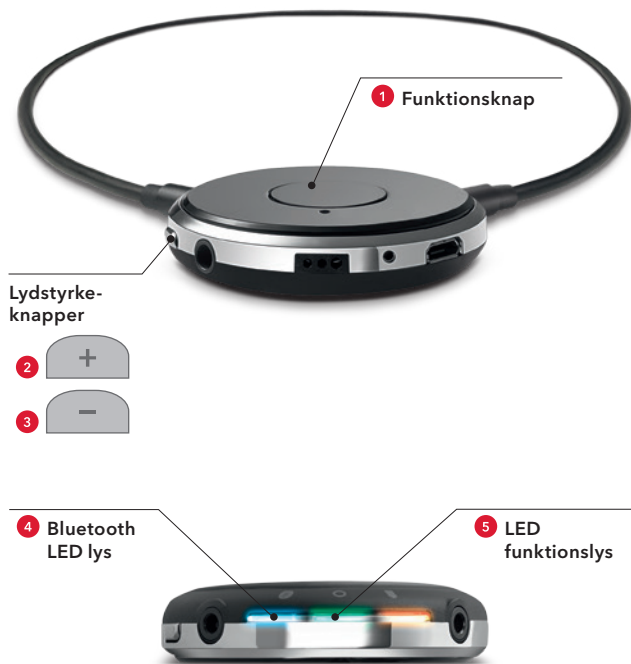

### Nem parring med høreapparaterne



#### Trin 1:

Placer easyTek omkring halsen. Tænd for easyTek ved at trykke på **1** indtil den grønne LED **5** tænder.



#### Trin 2:

Tænd for høreapparaterne og placer dem bag ørerne eller i ørerne. Den grønne LED **5** blinker kortvarigt og fader derefter ud. Nu er dine høreapparater og easyTek parret (forbundet).

## Audiostreaming

### Parring af easyTek med Bluetooth-enheder



#### Trin 1:

Tænd for easyTek ved at trykke på og holde **1** inde i flere sekunder. Hvis den blå LED **4** ikke begynder at blinke automatisk, skal du trykke på **1** og **2** indtil den blinker blåt.



#### Trin 2:

Tænd for Bluetooth-funktionen for den enhed, du ønsker at parre din easyTek med. Søg efter easyTek og vælg den. Den blå LED **4** vil blinke kortvarigt og derefter fade ud.

### Parring af easyTek med TV Transmitter Alternativ 1



#### Trin 1:

Tænd for easyTek ved at trykke på og holde **1** i flere sekunder. Tryk på **1**, **2** og **3** samtidigt, indtil den blå LED **4** blinker.



#### Trin 2:

Tænd for TV Transmitteren. Hold den inden for en afstand af højst 1 meter af din easyTek, og vent på at parringen automatisk finder sted. Det tager cirka 2 minutter. Den blå LED **4** vil stoppe med at blinke og forblive tændt.

### Parring af easyTek med TV Transmitter Alternativ 2



#### Trin 1:

Åbn easyTek appen på din smartphone



#### Trin 2:

Skann QR-koden på bagsiden af TV transmitteren

For information om installation af easyTek app se side 17.


## easyTek app.

Mere diskret og giver flere muligheder på din smartphone.



easyTek App giver dig flere funktioner og sikrer samtidig, at du kan justere dine høreapparater mere diskret. Og da du kan foretage alle indstillinger med din smartphone, ser det ud som om, du tjekker sms'er, når du i virkeligheden justerer dine høreapparater.

Du kan se status for dine høreapparater på skærmen på din egen smartphone, streame lyd fra audiokilder eller bruge telefonen som en fjernbetjening.

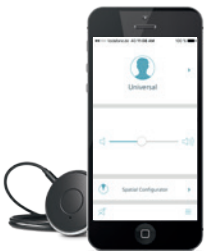

### Primært skærmbillede

Det primære skærmbillede i easyTek App giver hurtig adgang til vigtige justeringer som for eksempel ændring af lydstyrke samt valg af ønsket lytteprogram.



### Høreapparatets funktioner

Takket være easyTek App er det let og overskueligt at vælge den ønskede retningsvirkning for dine høreapparater. På illustrationen er fokus på alle lyde foran dig.

## Flere streamingmuligheder.

Her finder du ekstra tilbehør, der hjælper med til at give nemmere kommunikation.



VoiceLink

### VoiceLink.

Den eksterne mikrofon VoiceLink™ forbinder sig trådløst til easyTek. Når mikrofonen gives til en taler, streamer den talerens stemme direkte til dine høreapparater. Det kan være en fordel i vanskelige lyttesituationer, som for eksempel til foredrag eller møder.



TV Transmitter

### TV Transmitter.

TV Transmitteren forbinder TV, som ikke har Bluetooth-funktionen indbygget, med easyTek. På den måde kan du få lyden trådløst i dine høreapparater.



### miniPocket.

Diskret fjernbetjening.



Den ideelle løsning, hvis du ønsker en diskret fjernbetjening lige ved hånden. miniPocket™ er lille og pålidelig og passer selv i den mindste lomme.



miniPocket i detaljer.



### easyPocket.


Den elegante easyPocket™ med store knapper og letlæselige display gør det nemt at justere dine høreapparater.

easyPocket




## touchControl App.

Bare diskret.

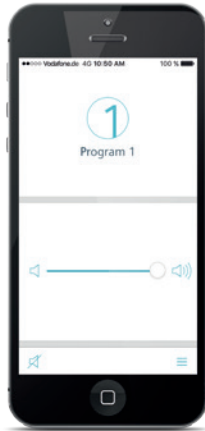


Gør din smartphone til en diskret fjernbetjening med touchControl App™. Nyd at have fuld kontrol over dine høreapparater direkte fra din smartphone.

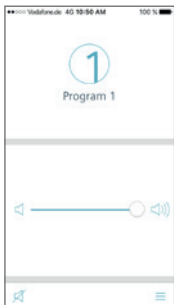

### Programskifte og lydstyrkændring

Tilpas dine høreapparater til forskellige lytte-situationer ved at ændre lydstyrken eller vælg et andet lytteprogram.

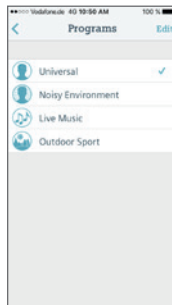

### Programliste

Programlisten har tydelige ikoner og tekster, der gør det nemt at vælge det ønskede lytteprogram.

## Download af app.

App-solut let at hente!

Let at bruge og let at finde: Hent easyTek App eller touchControl App til Android eller iOS smartphone på Google Play Store eller Apple App Store. Det bedste er, at vores App er helt gratis!

### Trin 1:



Sørg for at have en Google Play-konto (Android-telefoner) eller en Apple App Store-konto (iPhone).

### Trin 2:



Log ind på din konto på Google Play eller Apple App Store med din smartphone. Find easyTek App eller touchControl App.

### Trin 3:



Følg anvisningerne for at installere appen på din smartphone.

### Trin 4:



Find så ud af, hvor let det er at indstille høreapparaterne med den nye app. Kontakt din hørespecialist, hvis du har spørgsmål.

## Oplader

### eCharger.



eCharger

eCharger oplader genopladelige batterier i dine høreapparater natten over. Desuden har eCharger en tørrefunktion, så fugt fjernes fra høreapparaterne.

### Biladapter.



Biladapter

Biladapteren er et ekstra tilbehør, så du kan bruge opladeren i bilen.



Hvis du ikke er sikker på, hvilket tilbehør der er kompatibelt med dine høreapparater, vil din lokale høreklinik, dit høreinstitut eller kommunikationscenter hjælpe dig.

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser af eksisterende tekniske muligheder, der ikke nødvendigvis altid er til stede i hvert enkelt tilfælde, og som kan ændres uden forudgående varsel.

Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sivantos GmbH er under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Android og Google Play er varemærker ejet af Google Inc.

Apple App Store er et varemærke ejet af Apple Inc.

### **Juridisk producent**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Tyskland

Signia GmbH bruger varemærket Siemens i henhold til licensaftale med Siemens AG.

### **Kontakt i Danmark**

Sivantos A/S  
Ove Gjeddes Vej 9  
5220 Odense SØ  
Telefon 63 15 40 00

eur0056/1/1.000/0816

Order No. 02922-99C1-7600 | © 07.2016 Signia GmbH

Se mere på:

**[signia-hearing.dk](http://signia-hearing.dk)**

**[facebook.dk/signiahearing](https://facebook.dk/signiahearing)**

**[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)**