

Silk Nx

Brugsanvisning



Indhold

Velkommen	4
Dine høreapparater	5
Apparattype	5
Lær dine høreapparater at kende	5
Dele og betegnelser	6
Lytteprogrammer	7
Funktioner	7
Batterier	8
Batteristørrelse og tips til håndtering	8
Udskiftning af batterier	9
Daglig brug	10
Tænd og sluk	10
Anbring og fjern høreapparaterne	11
Justering af lydstyrken	14
Sådan skiftes lytteprogrammet	14
Særlige lyttesituationer	15
Brug af telefon	15
Vedligeholdelse	16
Høreapparater	16
Ørepropper	17
Professionel vedligeholdelse	20

Yderligere oplysninger	21
Sikkerhedsoplysninger	21
Tilbehør	21
Symboler anvendt i dette dokument	21
Fejlfinding	22
Service og garanti	23

Velkommen

Tak, fordi du har valgt vores høreapparater. Som det gælder alle nye ting, vil det tage nogen tid at blive fortrolig med dem.

Denne vejledning vil, sammen med eventuel hjælp fra din høreapparatspecialist, hjælpe dig med at forstå de fordele og den forbedrede livskvalitet, dine høreapparater kan give dig.

For at du kan få mest muligt ud af dine høreapparater, anbefales det, at du bærer dem hele tiden, hver dag. Det vil gøre det nemmere for dig at vænne dig til dem.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse denne brugsanvisning samt sikkerhedshåndbogen grundigt og fuldstændigt. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå beskadigelse eller personskader.

Dine høreapparater



Denne brugervejledning beskriver ekstra funktioner, dine høreapparater muligvis har.

Bed din høreapparatspecialist om at markere de funktioner, der er relevante for dine høreapparater.

Apparattype

Dine høreapparater bæres direkte i øregangen. Apparaterne er ikke beregnet til børn under 3 år eller til personer med en udviklingsalder på under 3 år.

Den trådløse funktionalitet muliggør avancerede lydfunktioner og synkronisering mellem dine to høreapparater.


Lær dine høreapparater at kende

Dine høreapparater har ingen kontrolknapper.



Du kan spørge din høreapparatspecialist, om der findes en smartphone-app til at styre dit høreapparat med.

Dele og betegnelser

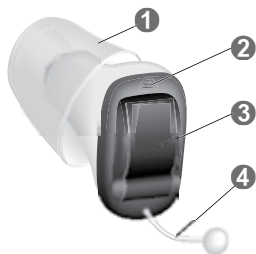

- ① Øreprop
(Click Sleeve)
 - ② Mikrofon
 - ③ Batterikammer
(tænd/sluk-funktion)
 - ④ Udtrækssnor
-

Du kan anvende de følgende standardørepropper:

Standardørepropper	Størrelse
--------------------	-----------

☐ 	Click Sleeve (åben eller lukket)
---	-------------------------------------

☐ 	Click Dome™ (åben eller lukket)
---	------------------------------------

☐ 	Click Dome halvåben
--	---------------------

☐ 	Click Dome dobbelt
---	--------------------

Du kan let udskifte standardørepropperne.
Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Læs mere i afsnittet "Sådan skiftes lytteprogrammet".

Funktioner

- ☐ **Forsinket tænding** gør det muligt at sætte høreapparaterne i uden at få hyletone.
Læs mere i afsnittet "Tænd og sluk".
- ☐ **Tinnitusfunktionen** udsender en behagelig lyd, som afleder din opmærksomhed fra din tinnitus.

Batterier

Når batteriet er ved at være brugt, bliver lyden svagere, og du vil høre et advarselssignal. Den tid, du har, før du skal skifte batteriet, afhænger af batteritypen.

Batteristørrelse og tips til håndtering

Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede batterier.


Batteristørrelse:	10
-------------------	----

- Brug altid den korrekte batteristørrelse til dine høreapparater.
- Fjern batterierne, hvis du ikke vil bruge høreapparaterne i flere dage.
- Hav altid reservebatterier med dig.
- Tag brugte batterier ud med det samme, og brug dine lokale genbrugsmuligheder, når du skal bortskaffe batterierne.

Udskiftning af batterier


Fjern batteriet:

- ▶ Åbn batterikammeret.
- ▶ Fjern batteriet med hånden.

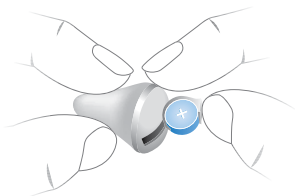

Isæt batteriet:

- ▶ Hvis batteriet har en beskyttende mærkat, skal du først fjerne mærkatet, når du er klar til at bruge batteriet.
- ▶ Sæt batteriet i med "+"-symbolet opad.

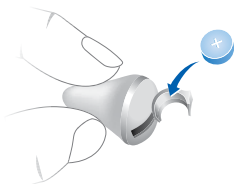

- ▶ Luk forsigtigt batterikammeret. Hvis der føles modstand, er batteriet ikke anbragt korrekt.

Prøv ikke at lukke batterikammeret med vold.
Det kan beskadige høreapparatet.

Daglig brug

Tænd og sluk

Du kan tænde og slukke for dine høreapparater på følgende måder.

Via batterikammeret:

- ▶ Tænd: Luk batterikammeret med isat batteri.
Standard lydstyrke og lytteprogram vælges.
- ▶ Sluk: Åbn batterikammeret helt.

Når du bærer høreapparaterne, kan et lydssignal indikere, når et apparat tændes eller slukkes.

Når **forsinket tænding** er aktiveret, tænder høreapparaterne først efter en forsinkelse på flere sekunder. Imens kan du sætte høreapparaterne i uden at skulle opleve ubehagelige hyletoner.

"Forsinket tænding" kan aktiveres af din høreapparatspecialist.

Anbring og fjern høreapparaterne



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- Brug altid høreapparatet med en ørepropp.
- Sørg for, at øreproppen er korrekt monteret.

Anbring høreapparatet:

- Identificér højre og venstre høreapparat, så du anbringer det i det korrekte øre. Mærkningens farve på høreapparatet indikerer siden:
rød farve, påtrykt "R" = højre øre
blå farve, påtrykt "L" = venstre øre
- Sørg for at den lille spids på Click Sleeve passer med den linje, der er trykt på høreapparatet.


Rigtigt



Forkert




- Hold høreapparatet korrekt før det anbringes: Vær særlig opmærksom på udtrækssnoren, der indikerer bunden. Den pil der er trykt på høreapparatet skal pege opad.

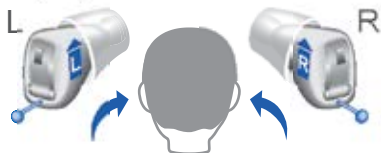

- Skub forsigtigt høreapparatet ind i øregangen.
- Drej den let, indtil den sidder godt.

Åbn og luk munden for at undgå, at der ophobes luft i øregangen.

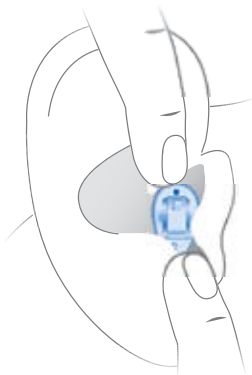

FORSIGTIG

Risiko for skader!

- Indsæt forsigtigt høreapparat og stik det ikke for langt ind i øret.



- Det kan muligvis hjælpe at anbringe **højre** høreapparat i med **højre** hånd og **venstre** høreapparat med **venstre** hånd.
- Hvis du har problemer med at anbringe høreapparatet, kan du bruge den anden hånd til forsigtigt at trække øreflippen nedad. Dette åbner for øregangen og letter anbringelsen af høreapparatet.

Fjern høreapparatet:



BEMÆRK

Træk aldrig i dækslet til batterikammeret for at fjerne høreapparatet. Dette kan beskadige høreapparatet.

- ▶ Tryk let bag på øret for at løsne høreapparatet.
- ▶ Tag høreapparatet ud ved at trække i udtrækssnoren bagud.



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ I meget sjældne tilfælde kan øreproppen blive siddende i øret, når du tager høreapparatet af. Sker dette, skal du få den fjernet hos en læge.

Rengør og aftør høreapparaterne efter brug. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Justering af lydstyrken

Dine høreapparater justerer automatisk lydstyrken efter lyttesituationen.

- Hvis du foretrækker at justere lydstyrken manuelt, kan du vælge at bruge en fjernbetjening.

Et signal kan indikere en ændring i lydstyrken.

Sådan skiftes lytteprogrammet

Høreapparaterne tilpasser automatisk deres lyd afhængig af lyttesituationen.

Dine høreapparater kan også have flere lytteprogrammer, hvormed du kan ændre lyden efter ønske. Et lydsignal kan indikere programændringen.

- For manuelt at ændre lytteprogrammet, skal du bruge en fjernbetjening.

Der henvises til afsnittet "Lytteprogrammer" vedrørende en liste med dine lytteprogrammer.

Særlige lyttesituationer

Brug af telefon

Når du taler i telefon, skal du drejer telefonen let, så dit øre ikke er helt dækket.



Telefonprogram

Du foretrækker muligvis et bestemt lydniveau, når du taler i telefon. Bed din høreapparatspecialist om at indstille et telefonprogram.

- Skift til telefonprogrammet, når du taler i telefon.
Det er angivet i afsnittet "Lytteprogrammer", om et telefonprogram er indstillet til dine høreapparater.

Vedligeholdelse

For at undgå beskadigelse er det vigtigt at passe godt på høreapparaterne og overholde nogle få grundregler, men de bliver hurtigt en vane.

Høreapparater

Tørring og opbevaring

- ▶ Lad dine høreapparater tørre natten over.
- ▶ Hvis høreapparaterne ikke bruges i længere tid, bør de opbevares i et tørt miljø med åbent batterikammer, og med batterierne taget ud.
- ▶ Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Rengøring

Af hygiejneårsager samt for at bevare funktionaliteten skal du rengøre dine høreapparater dagligt.

- ▶ Rengør dine høreapparater dagligt med en blød, tør klud.
- ▶ Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig apparaterne i vand.
- ▶ Tryk aldrig på apparatet, når du rengør det.
- ▶ Spørg din høreapparatspecialist efter anbefalede rengøringsprodukter, særlige vedligeholdelsessæt eller yderligere oplysninger om, hvordan du holder dine høreapparater i god stand.



Ørepropper

Rengøring


Der kan samle sig ørevoks på ørepropperne. Det kan påvirke lyd kvaliteten. Rengør ørepropperne dagligt.

- Rengør øreproppen med en blød og tør klud umiddelbart efter, at du har fjernet øreproppen fra øret.

Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.



- Klem spidsen på øreproppen for at fjerne indtørret ørevoks. Rengør som vist ovenfor.

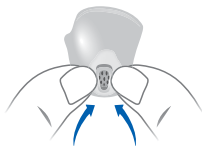


Udskiftning

Udskift almindelige ørepropper ca. hver 3. måned. Udskift dem tidligere, hvis de får revner eller andre forandringer. Proceduren for udskiftning af almindelige ørepropper afhænger af deres type. I afsnittet "Dele og betegnelser" har din høreapparatspecialist markeret den type ørepropp, du har.

Udskiftning af Click Sleeves

- Tag fat i Click Sleeve med dine fingre, og træk den af. Hvis du ikke kan få fat i den, kan du vende indersiden udad og derefter trække den af.

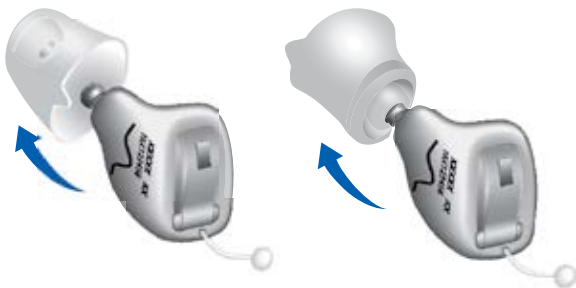

- Vær særligt omhyggelig med at den nye Click Sleeve klikker hørbart på plads.




- Når man installerer den nye Click Sleeve skal man sørge for at den lille spids på Click Sleeve passer med den linje, der er trykt på enheden.



Udskiftning af Click Domes

Hvis du har problemer med at fjerne den gamle Click Dome, kan du bruge afmonteringsværktøjet eller følge instruktionerne på emballagen til Click Domes:

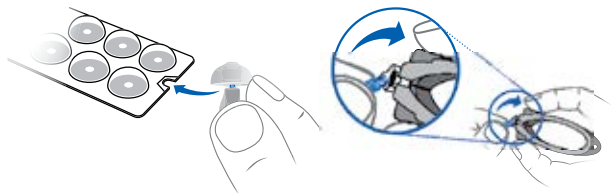

Afmonteringsværktøjet fås som tilbehør.

- Vær særligt omhyggelig med at den nye Click Dome klikker hørbart på plads.



Professionel vedligeholdelse

Din høreapparatspecialist kan udføre en grundig, professionel rengøring og vedligeholdelse.

Bed din høreapparatspecialist om at få individuel anbefaling af vedligeholdelsesintervaller samt anden hjælp.

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsoplysninger

For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med enheden.

Tilbehør

Typen af tilgængeligt tilbehør afhænger af høreapparatets type. Det kan f.eks. være en fjernbetjening, en streamer, en smartphone-App som fjernbetjening.

Visse typer af høreapparater understøtter CROS- og BiCROS-løsninger for personer som er døve på det ene øre og med normal hørelse eller høretab på det andet øre.

Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Fejlfinding

Problem og mulige løsninger

Lyden er svag.

- Luk forsigtigt batterikammeret helt.
 - Rengør høreapparatet.
 - Udskift det brugte batteri.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Høreapparatet hyler.

- Sæt høreapparatet i igen så det sidder godt.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Lyden er forvrænget.

- Udskift det brugte batteri.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Høreapparatet giver bipsignaler.

- Udskift det brugte batteri.
-

Høreapparatet virker ikke.

- Tænd for høreapparatet.
 - Luk forsigtigt batterikammeret helt.
 - Udskift det brugte batteri.
 - Sørg for, at batteriet er sat korrekt i.
 - Forsinket tænding er aktiv. Vent i nogle sekunder, og kontrollér igen.
-

Konsultér din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer, eller indsend høreapparatet til serviceafdelingen.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Højre:

Servicedatoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Dato for tilpasning:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspecialist



Juridisk producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10

D00178898/1/200/0418 | D00178898
Document No. 03529-99T01-6200 DA-DNK | D00173890
Master Rev01, 02.2018
© 03.2018, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia.dk